



スロープ

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。


床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

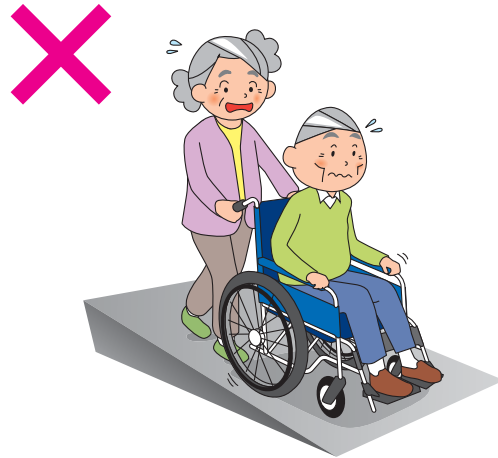

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器	スロープの長さ	段差の高さ											
		5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
	65cm	Green	Yellow	Purple									
	70cm	Green	Yellow	Purple									
車椅子・ 車椅子 付属品	85cm	Green	Yellow	Purple									
	87.5cm	Green	Yellow	Purple									
スロープ	100cm	Green	Yellow	Purple									
	120cm	Green	Yellow	Purple									
	125cm	Green	Yellow	Purple									
移動用 リフト・ つり具	135cm	Green	Yellow	Purple									
	150cm	Green	Yellow	Purple									
	165cm	Green	Yellow	Purple									
介護保険 購入 対象品	175cm	Green	Yellow	Purple									
	200cm	Green	Yellow	Purple									
	205cm	Green	Yellow	Purple									
	240cm	Green	Yellow	Purple									
販売品	245cm	Green	Yellow	Purple									
	255cm	Green	Yellow	Purple									
	285cm	Green	Yellow	Purple									

押してくれる人が
限界の角度



傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

でも5°は
きつい~!




傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満

情報

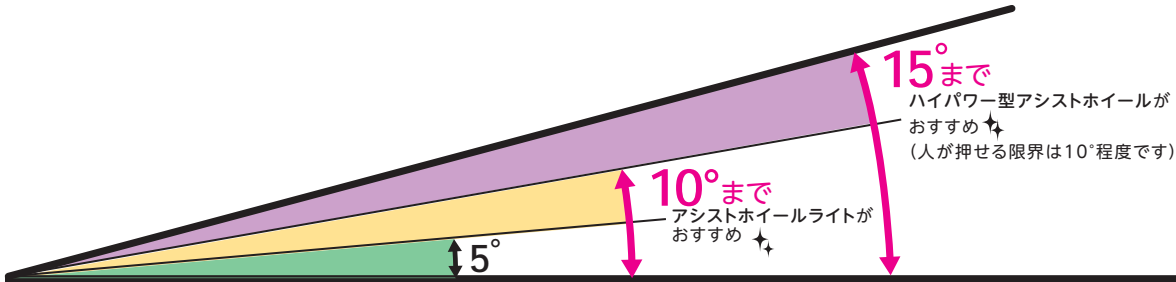

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**


サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008

ベッド・
ベッド
付属品


ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時
全幅 35

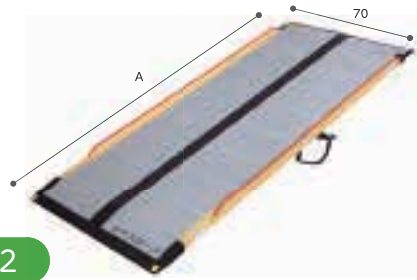

STEP 1

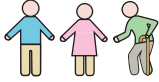

介助者の状況を確認し、選定してください。
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上


ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。

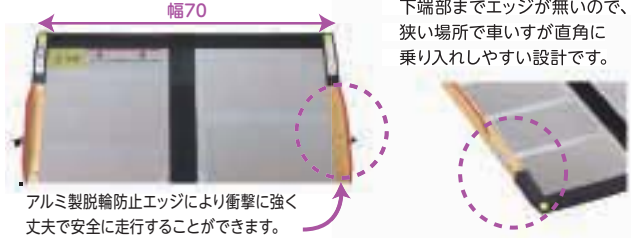

下端部までエッジが無いので、狭い場所でも車いすが直角に乗り入れしやすい設計です。

アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く丈夫で安全に走行することができます。

STEP 3

収納しやすい自立設計です。
様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4



設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。

走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いて痛くありません。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	418円	836円	1,254円	4,180円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	524円	1,048円	1,572円	5,240円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	524円	1,048円	1,572円	5,240円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	628円	1,256円	1,884円	6,280円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	628円	1,256円	1,884円	6,280円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	734円	1,468円	2,202円	7,340円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	890円	1,780円	2,670円	8,900円

ケアスロープJ/ケアスロープJ用ジョイント台

ケアメディックス

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。

下端側ケアスロープ + ケアスロープJ用ジョイント台 + 上端側ケアスロープ = ケアスロープJ



※スロープ全長、重さケアスロープJ用ジョイント台含む ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm

商品名	スロープ全長	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	1,540円	3,080円	4,620円	15,400円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	1,594円	3,188円	4,782円	15,940円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	1,644円	3,288円	4,932円	16,440円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	1,802円	3,604円	5,406円	18,020円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報




ダンスロープ ライト

材質：カーボンファイバー

床ずれ
防止用具

ダンロップホームプロダクツ

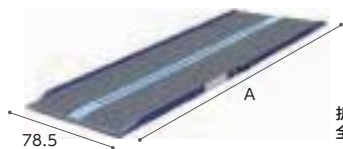折り畳み時
全幅 39cm体位
変換器

両端の落下防止エッジで、より安全に。(S-85には落下防止エッジがついていません。)

軽量で、移動の多い場合も携帯しやすいタイプです。最大荷重300kg。軽くても丈夫なカーボンファイバー製。

認知症
老人徘徊
感知機器

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
S-85	85	約4	28-0920-1	00532-000013	- 円	- 円	- 円	- 円
S-125	125	約6	28-0921-1	00532-000012	- 円	- 円	- 円	- 円
S-165	165	約8	28-0922-1	00532-000011	- 円	- 円	- 円	- 円
S-205	205	約10	28-0923-1	00532-000010	- 円	- 円	- 円	- 円
S-255	255	約14	28-0924-1	00532-000016	- 円	- 円	- 円	- 円

手すり

歩行
補助杖

MEMO

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・
ベッド
付属品

エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!

76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50円	100円	150円	500円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50円	100円	150円	500円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50円	100円	150円	500円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50円	100円	150円	500円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50円	100円	150円	500円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	50円	100円	150円	500円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	50円	100円	150円	500円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	50円	100円	150円	500円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	50円	100円	150円	500円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	50円	100円	150円	500円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	50円	100円	150円	500円

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

安心のご提案


滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工

車イスや歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。

安心のずれ防止仕様

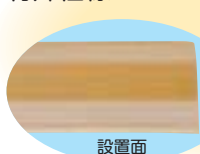
置くだけでずれにくい
特殊仕様

設置面



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

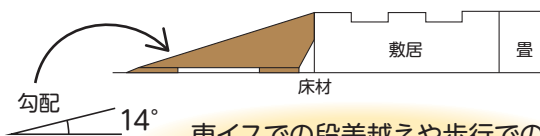車イスでの段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報